



Enhance

Equilibrio perfecto entre ciencia, seguridad
y belleza natural.

Enhance es un gel de hialuronato de sodio reticulado de muy alto peso molecular, diseñado para proporcionar resultados estéticos naturales y duraderos.

VENTAJAS CLAVE

- Alta biocompatibilidad.
- Procedimiento seguro y mínimamente invasivo.
- Integración suave con la piel.
- Ausencia de inflamación.

BENEFICIOS


Enhance puede emplearse para:

- Rellenar depresiones y surcos.
- Mejorar contornos faciales.
- Restaurar volúmenes perdidos.
- Rehidratar y rejuvenecer la piel.
- Aumentar la firmeza y elasticidad.
- Mejorar la textura, aspecto y brillo.
- Áreas de aplicación: cara, cuello, escote, labios, nariz y manos.

SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD

- Formulado con ácido hialurónico de muy alta pureza, grado inyectable.
- Obtenido por biofermentación no animal.
- Producto estéril, isoosmolar y apirógeno. Esterilizado en su envase final.
- No requiere prueba cutánea previa.
- Presentación en jeringas prellenadas, con regla graduada al 0,025 de ml, listas para usar.

Enhance

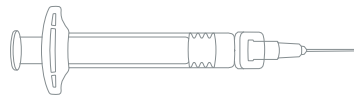

Resultados naturales, seguros y duraderos.

Modelo	SOFT	INTENSE	VOLUME
Uso previsto	<p>Dermis superficial a media con la finalidad de tratar:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Imperfecciones superficiales en dermis y comisuras. · Líneas finas en la frente · Valle de lágrimas (ojeras) · Líneas periorculares y peribucales superficiales · Hidratación y perfilado de labios 	<p>Dermis media a profunda con la finalidad de tratar:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Arrugas glabellares profundas · Líneas periorculares y peribucales profundas · Aumento de labios · Surco nasogeniano · Contorno mandibular · Líneas de marioneta 	<p>Dermis profunda y subcutánea con la finalidad de tratar:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Áreas de gran volumen mediante contorneado y modelado · Mentón · Pómulos · Contorno mandibular profundo · Surco nasogeniano profundo · Rinomodelación · Fosa temporal
Indicación sugerida	Imperfecciones superficiales en dermis y comisuras	Líneas profundas y más pronunciadas	Áreas de gran volumen mediante contorneado y modelado
Fórmula	Hialuronato de sodio 1,0%, Lidocaína 0,3%, BDDE, Buffer fosfato y solución fisiológica, c.s.	Hialuronato de sodio 2,0%, Lidocaína 0,3%, BDDE, Buffer fosfato y solución fisiológica, c.s.	Hialuronato de sodio 3,0%, Lidocaína 0,3% BDDE, Buffer fosfato y solución fisiológica, c.s.
Viscosidad	Baja	Media	Alta
G'	250 Pa	350 Pa	650 Pa
pH	Neutro	Neutro	Neutro
Límite residual de BDDE	< 0,1 ppm	< 0,1 ppm	< 0,1 ppm
Contenido	Jeringa prellenada de 1 ml + 2 agujas 30 G 1/2"	Jeringa prellenada de 1 ml + 2 agujas 27 G 1/2"	Jeringa prellenada de 1 ml + 2 agujas 27 G 1/2"

Gel de hialuronato de sodio para relleno dérmico

¿Sabías que Enhance está desarrollado con una tecnología de reticulación patentada?

La tecnología de reticulación **BARR®** representa un enfoque innovador en la formulación de geles de ácido hialurónico para relleno dérmico garantizando mayor seguridad, estabilidad y resultados duraderos en cada aplicación.

Esto genera una estructura altamente estable y resistente a la degradación enzimática, favoreciendo así una alta biocompatibilidad, seguridad a largo plazo y elevada biodegradabilidad compensada con neoformación.



Tecnología
de reticulación

BARR®

Enhance ofrece una experiencia confortable, libre de dolor e inflamación, sin riesgo de edemas ni granulomas.

La reticulación consiste en enlazar cadenas lineales neutras de ácido hialurónico (HA), generando una estructura tridimensional que aumenta su resistencia frente a la degradación enzimática natural y, en consecuencia, prolonga su duración.



HA NO RETICULADO: El ácido hialurónico (HA) no reticulado es degradado por las enzimas de nuestro organismo en un plazo de 2 a 3 días, lo que explica por qué su inyección no ofrece una corrección efectiva de las arrugas.



HA RETICULADO: El agente reticulante actúa creando enlaces entre las cadenas de ácido hialurónico, lo que les confiere resistencia frente a la degradación enzimática natural del organismo.

Enhance

Gel de hialuronato de sodio para relleno dérmico

Belleza que perdura:

Resultados naturales, seguros y duraderos.
Con tecnología de reticulación avanzada,
Enhance mantiene el volumen y la firmeza
de la piel, prolongando su vitalidad y juventud.



Presentación 1 unidad x 1 ml.



OFICINAS COMERCIALES
Juramento 1775 · C1428
CABA · Argentina

PLANTA DE PRODUCCIÓN
Perdriel 1624 · C1279
CABA · Argentina

+5411 4302-7111 · wellness@implantec.com.ar
www.implantecwellness.com.ar



Sistema de Gestión de calidad ISO 13485:2016